

### تعليمات حول فحص الأمراض الجنسية الانتقالية للنساء


مسحة مهبلية

يتم فحصك بالتشاور مع طبيب (العائلة) الخاص بك بخصوص مرض جنسي انتقالي SOA. تسبب الكائنات الدقيقة كالبكتريا أو الفيروسات أو الطفيليات الأمراض الجنسية الانتقالية. هناك حاجة للغشاء المخاطي لمهبلك لذلك، تأخذين لذلك بنفسك بعضا من الغشاء المخاطي لمهبلك في المنزل. تقرأ في هذا المنشور كيف تقومين بذلك.

#### ■ المظروف الأصفر

منحك طبيب (العائلة) الخاص بك مظروفا أصفرا. تجدين في هذا المظروف كل ما تحتاجينه، بما فيه استمارة الطلب المملوءة من قبل طبيب (العائلة) الخاص بك.

ما الذي يوجد في داخل المظروف الأصفر؟

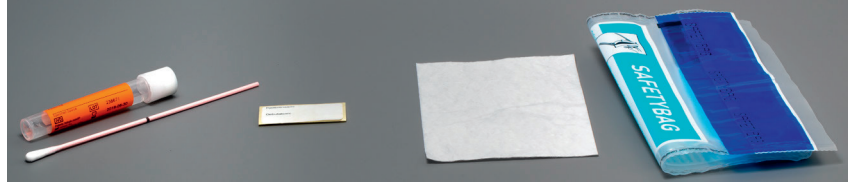

قنينة و عود قطني

لصقة

ورقة امتصاص

كيس أمان

#### ■ تعليمات أخذ المسحة المهبلية

تجدين في الجهة الخلفية للمنشور تعليمات أخذ الغشاء المخاطي الخاص بك. اقرأي هذه التعليمات جيدا قبل أن تبدأي بذلك.

#### ■ تسليم المظروف (\*)

يخبرك طبيب (العائلة) الخاص بك أين يمكنك تسليم المظروف. قومي بذلك بأسرع ما يمكن بعد أخذ الغشاء المخاطي.

#### ■ أسئلتك

هل لديك أسئلة حول أخذ الغشاء المخاطي وأو نتيجة الفحص؟ اتصلي عندئذ بطبيب (العائلة) الخاص بك. يمكنك عند وجود أسئلة أخرى الاتصال بالمختبر:

• رقم الهاتف 072 - 5485136

• البريد الإلكتروني [servicemicrobiologie@nwz.nl](mailto:servicemicrobiologie@nwz.nl)

تجدين المزيد من المعلومات حول المختبر على [www.nwz.nl](http://www.nwz.nl) تحت اختصاص: *medische microbiologie*.




#### تعليمات لأخذ الغشاء المخاطي للمهبل

1. اغسلي يديك جيدا أولا. اتبعي التعليمات التالية بشكل جيد:
2. افتحي المغلف الذي يحتوي العود القطني: لا تلمسي النهاية القطنية
3. أمسكي العود القطني باستخدام الإبهام و السبابة
4. أدخل العود القطني في المهبل لمسافة 5 سم تقريبا.
5. اعملي حركات دائرية بالعود القطني لمدة 10 إلى 30 ثانية. أحرصي على أن يلامس العود القطني الغشاء المخاطي جيدا و أن تتبلل النهاية القطنية. ثم اسحبي العود القطني إلى الخارج

#### مهم

أحرصي ألا تلمسي النهاية القطنية المبللة.

6. أديري غطاء القنينة لفتحه بحذر بحيث لا ينسكب السائل إلى خارج القنينة
7. ضعي العود القطني مع النهاية القطنية في السائل داخل القنينة
8. ثم اكسري العود بعد ذلك
9. ارمي العود
10. أديري الغطاء على القنينة لإقفالها بشكل جيد بحيث لا يحدث تسريب
11. اكتبي اسمك و تاريخ ميلادك على اللصقة و ألقها على القنينة
12. اكتبي تاريخ جمع المادة على استمارة الطلب.
13. ضعي القنينة مع ورقة الامتصاص في كيس الأمان و أغلقي كيس الأمان
14. أغلقي كيس الأمان و ضعيه مع استمارة الطلب في المظروف الأصفر.
15. احتفظي بالمظروف في درجة حرارة الغرفة

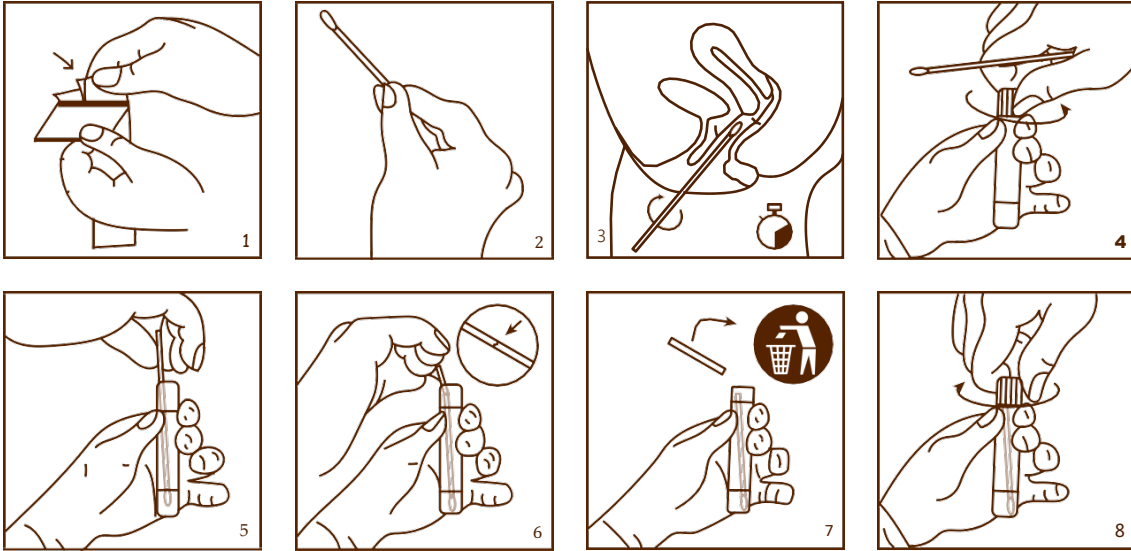

افرأي الآن على الجهة الأمامية الفصل: تسليم المظروف (\*)